


Quick start guide * クイックスタートガイド * 빠른 시작 가이드




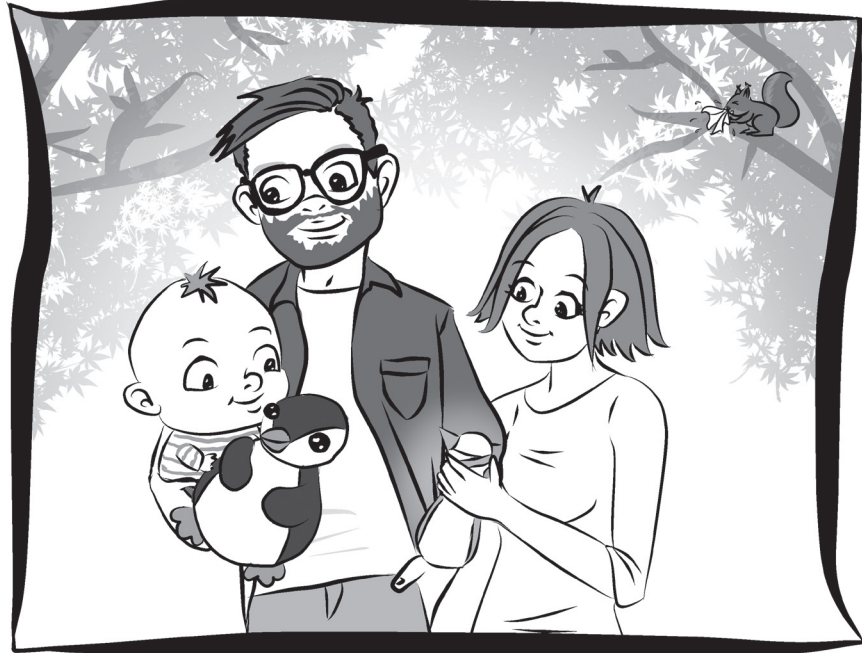


Before using the Nosiboo Go, carefully read this guide and the **User Manual** as well! Please keep this guide for future reference.

Nosiboo Go をご使用になる前に、このガイドと使用説明書をよくお読みください。必要な時に参照できるようにこのガイドを保管してください。


Nosiboo Go 사용 전 이 가이드와 사용 설명서를 주의 깊게 읽어주시시오! 나중에 참조할 수 있도록 이 가이드를 보관해주시시오.

Pingo & Nosiboo

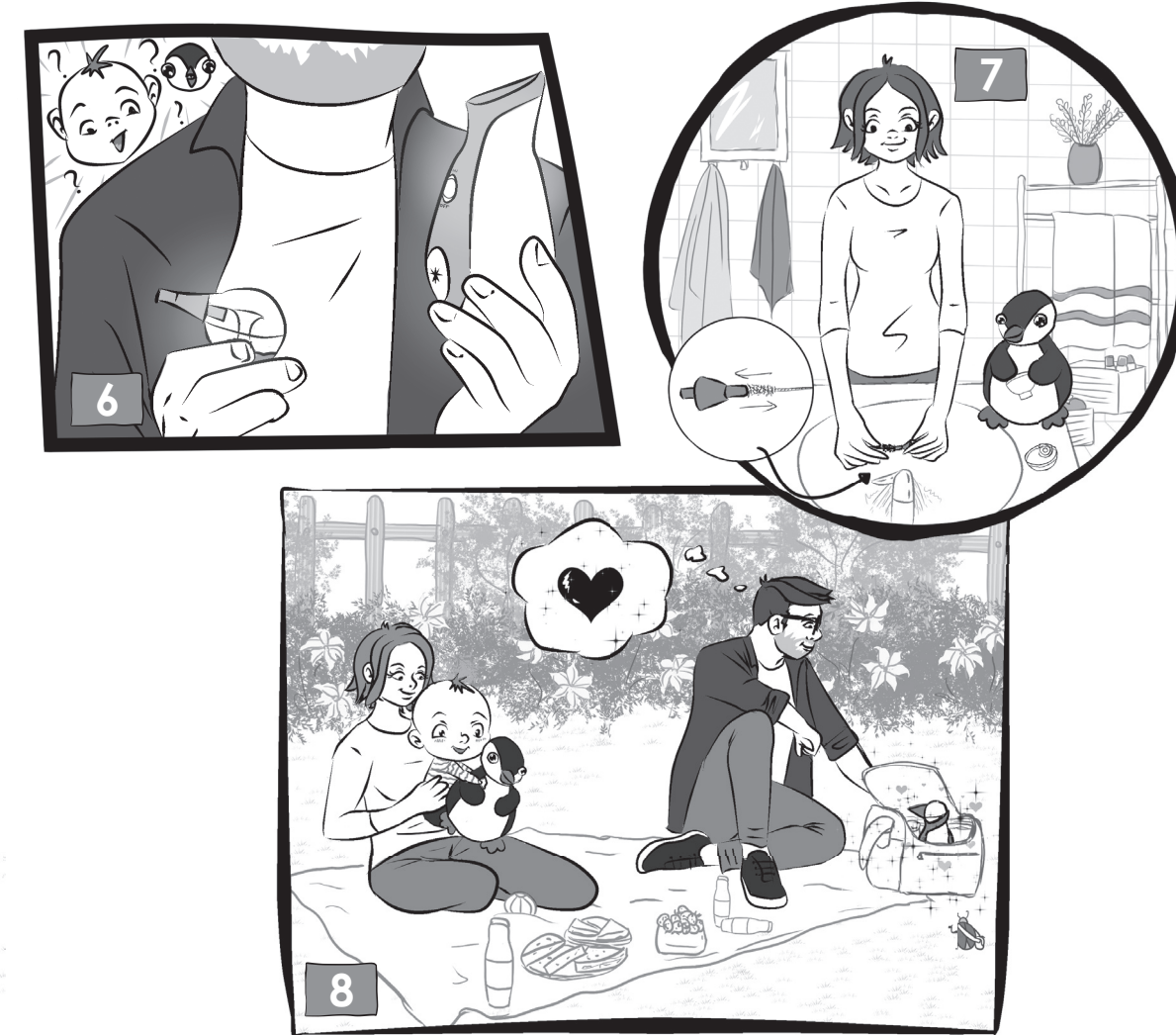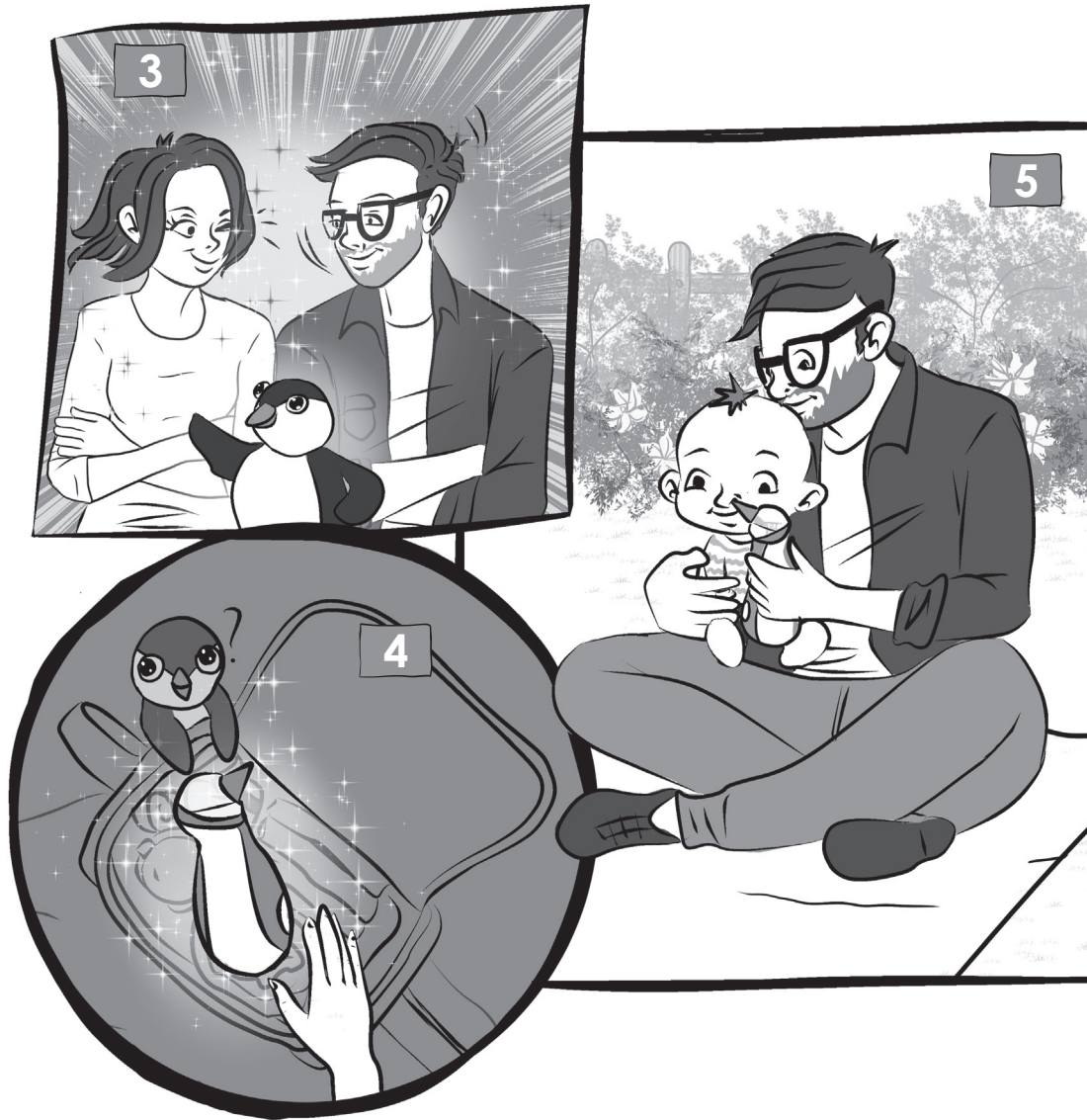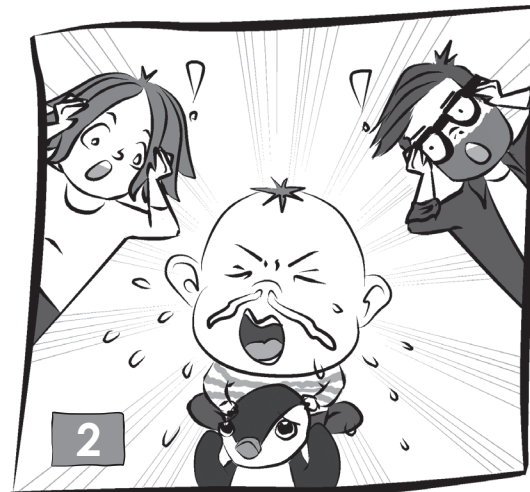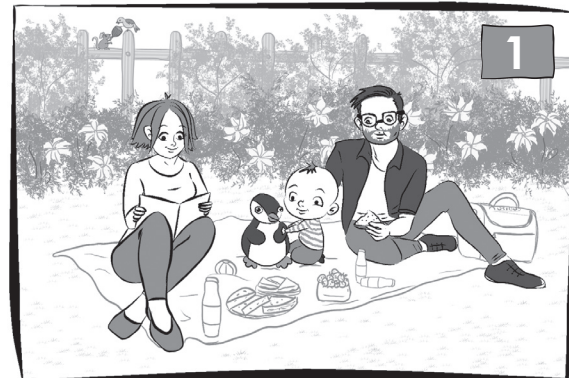

to be continued...

IN THE BOX



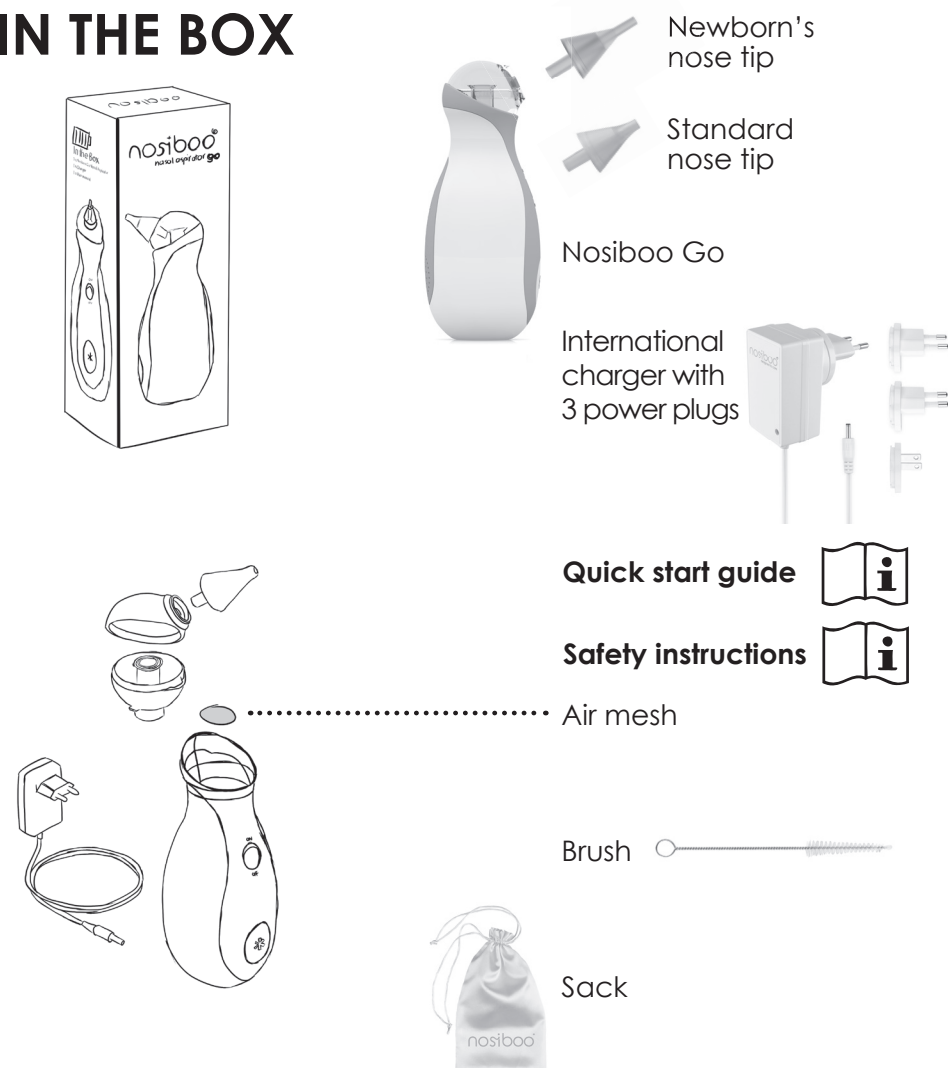


Contact the distributor if any part is missing!


USING THE NOSIBOO GO

The device should be used for removing the nasal mucus from children's nose. It should not be used for any other purposes.


First clean* and dry the parts of the Penguin head.
*Check the "CLEANING" section below for more details about the proper cleaning method.

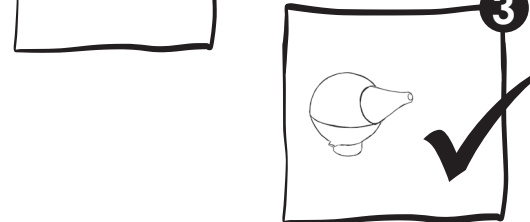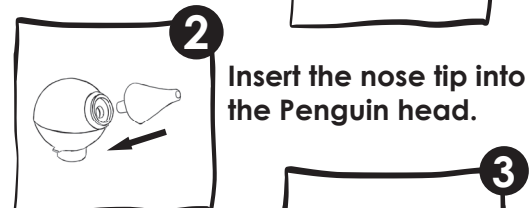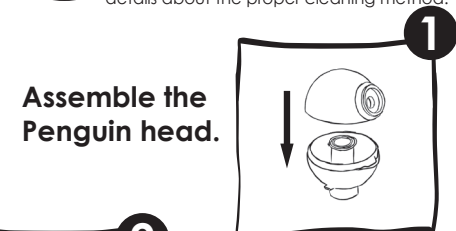

Make sure the air mesh is in its place, the Penguin head is assembled properly and installed on the device in the correct way.

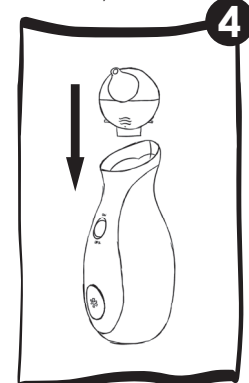

The device is ready to use.

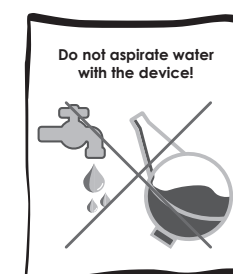

INSTRUCTIONS FOR USE & SETTINGS

1 Getting started
Simply turn it on.

The effective and strong (max.) suction power has been proven safe for nasal aspiration by ENT doctors.

2 Hold your child in a stable position.
* Aspirate the nose of infants after laying them into a stable position and hold their head during the process.
* You may also sit them in an infant bouncer or infant seat.
* If the child is already able to sit, sit them in your lap. In this case, do not lay the child on their back during the aspiration.

3 Insert the clean, dry nose tip into the child's nostril.
* Move the nose tip around gently to make sure that you get all areas of the nostril.

! If you experience that mucus or liquid has entered the device then stop using the Nosiboo Go, turn it off and contact the Nosiboo customer service team right away.


* Don't turn the device upside down meanwhile use.

4 Switch off the device after use.
* We highly recommend removing the Penguin head and cleaning it right away.

5 Charging
* After use, or if the device's battery just ran low, wait a few minutes until the device cools down and then start charging it.
* Green LED - Fully charged
* Red LED - Still charging
* While being charged, the device cannot be used.
* Use the power plug suitable for the socket.

CLEANING

Detach the Penguin head in the following order:

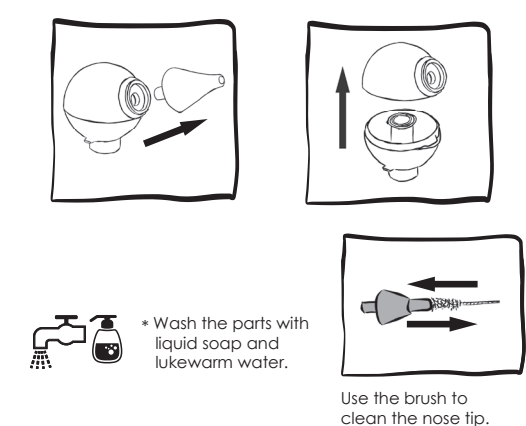

* You can soak the parts in a disinfection liquid, just make sure the liquid is safe to use for baby equipment.
* Let the parts dry completely before the next use.

* It is not allowed to use a dishwasher, boiling water, microwave oven, vaporizer or baby bottle sterilizer for cleaning the spare parts because they might deform by heat!

* The air mesh is there to prevent solid objects and dust from entering the housing.
* The air mesh is not there to absorb any mucus or liquid.
* If the air mesh is dirty or clogged, replace it.
* It can function well for a very long time next to the proper usage of the device.

* Clean the housing with a dry, soft cloth.
* Do not use any liquids, detergents or chemicals.
* Keep the device in a place where it is protected from dust, direct sunlight and heat.

HINTS & TIPS

* The Penguin head must be assembled and disassembled in the right order.
* Do not cover the vents on the back of the device while in use.
* Dry, very thick mucus can be dissolved by a mild saline solution. After using it, wait a few minutes, wipe excess discharge with a tissue, then reuse the nasal aspirator as directed.
* Do not use more than 5 ml of saline solution at once.

* The device should only be used by adults.
* Do not allow children to play with the device, it is NOT A TOY.



Download User manual / Quick guide

AFTER-SALE SERVICE
For more information about usage, cleaning, and for troubleshooting, see the User Manual.

www.nosiboo.com
customerservice@nosiboousa.com
(312) 957-6046

*
A/S 서비스
사용법, 세척 및 문제 해결에 대한 더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해 주세요.
한국 내의 고객 : nosiboo.kr
customer@nosiboo.kr
+82 (0)2-419-3927

*
アフターサービス
使い方、洗浄方法、およびトラブルシューティングの詳細については、取扱説明書をご確認ください。
日本: nosiboo.jp
customerservice@nosiboousa.com
Tel : (312) 957-6046

